dialex BIOMEDICA

clinell®

CLINELL UNIVERSAL BROCHURE PRODUIT



Dialex Biomedica SA
Caetsbeekstraat 1
3740 Bilzen-Hoeselt
Belgique
Tél.: +32 (0)89 41 71 40

www.dialexbiomedica.be
info@dialexbiomedica.be

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES SURFACES EN UNE SEULE ÉTAPE

Efficaces, sûrs et faciles à utiliser avec les lingettes et le spray Clinell Universal.

Formule unique et brevetée sans alcool.

Les lingettes Clinell Universal Wipes sont des lingettes nettoyantes et désinfectantes sans alcool destinées aux dispositifs médicaux non invasifs (CE) et aux surfaces générales (biocide PT2), qui, en un seul geste, éliminent les salissures tout en neutralisant un large spectre de micro-organismes et en prévenant le développement de résistances.

Grâce à un temps de contact court, au moins 99,99 % des germes sont efficacement éliminés. Les lingettes Clinell Universal Wipes contiennent une combinaison synergique de plusieurs principes actifs (biocides) aux mécanismes d'action variés, associés au Polyquat. Ces lingettes présentent une excellente compatibilité avec les matériaux et sont faciles à utiliser dans n'importe quel environnement.

Cette approche contribue à une prévention cohérente des infections et favorise une utilisation responsable des désinfectants.



Clinell Universal Wipes (200)



Renseignez-vous auprès de Dialex Biomedica pour obtenir vos distributeurs gratuits.


Principaux avantages




- 2-en-1 ; Double action : nettoyage et désinfection en une seule étape.



- Temps de contact rapide : efficace à partir de 10 secondes (en fonction du micro-organisme et de la norme EN applicable).

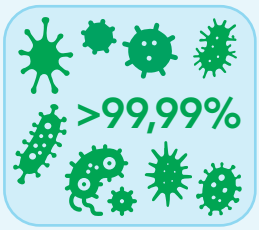

- Large spectre antimicrobien : action bactéricide, virucide, fongicide et mycobactéricide.

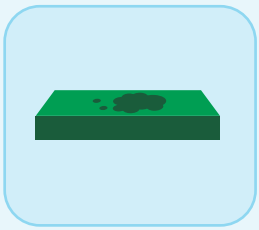

- Testé dans des conditions sales conformément aux normes EN applicables.

Convient pour les plastiques, le caoutchouc et les métaux

- Excellente compatibilité avec les matériaux.



- Prêt à l'emploi : pas de dilution, pas d'erreurs de mélange.



- Doux pour la peau : testé dermato-logiquement et ne nécessite pas le port de gants.



- Sûr à l'emploi, aucune mention de danger.



- Lingette solide, qui ne peluche pas et résistant à la déchirure pour une répartition optimale.



- Distributeurs fournis gratuitement.

Conçu pour la prévention des infections

Les lingettes Clinell Universal Wipes ont été conçues pour faciliter, accélérer et uniformiser la décontamination des surfaces dans les établissements de santé. En combinant deux étapes en un seul produit, elles favorisent un meilleur respect des protocoles de nettoyage et de désinfection.

Ces lingettes sont adaptées à une utilisation quotidienne entre les patients et contribuent à limiter la transmission des infections nosocomiales.

Efficacité antimicrobienne

Résultats des tests et normes EN obtenues

L'efficacité des lingettes a été testée à chaque fois avec le liquide extrait de la lingette, dans des conditions de saleté, conformément aux normes européennes les plus récentes.

Efficace notamment contre :

- Bactéries à Gram positif (notamment Staphylococcus aureus, SARM, entérocoques, VRE).
- Bactéries à Gram négatif (notamment E. coli, Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella).
- Mycobactéries (notamment Mycobacterium bovis, tuberculosis, terrae).
- Levures et champignons (notamment Candida albicans, auris).
- Virus – enveloppés et non enveloppés (notamment l'adénovirus, le norovirus, la grippe, le SARS-CoV-2, l'hépatite B et C, le papillomavirus, le rotavirus, le virus de la vaccine).

Normes courantes : EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615, EN 16777.

Un tableau détaillé des performances est disponible sur demande.

Temps de contact

Le temps de contact correspond à la durée pendant laquelle un désinfectant doit rester en contact avec un micro-organisme pour le détruire. Si un désinfectant prétend pouvoir éliminer 99,99 % du SARM en 1 minute, la surface bactérienne doit rester visiblement humide pendant au moins 1 minute pour que ce désinfectant puisse détruire cette bactérie. C'est pourquoi, lors de l'utilisation de lingettes désinfectantes, il est important de laisser la surface sécher naturellement à l'air libre et de ne jamais l'essuyer. Des temps de contact irréalistes donnent lieu à des produits peu pratiques qui peuvent ne pas être efficaces dans des conditions réelles. Le fabricant effectue des tests rigoureux avec Clinell afin de garantir que tous les temps de contact et toutes les allégations de destruction des micro-organismes sont réalisables dans des conditions réelles.

Principales études cliniques

Les produits Clinell ont été conçus pour être efficaces. C'est pourquoi ils ont été testés dans des conditions réelles et sur des durées d'application réalistes. Leur efficacité a été confirmée, outre les tests en laboratoire, par des études cliniques telles que :

Étude CLEEN

Une baisse significative de

34,50%

des infections nosocomiales




y compris les infections sanguines, les pneumonies, les infections urinaires, les infections de la peau et des tissus mous, la COVID-19 et les infections ORL.



Amélioration significative de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection.

Diminution de la prévalence des infections sanguines, des infections urinaires, des pneumonies et des infections des plaies chirurgicales.

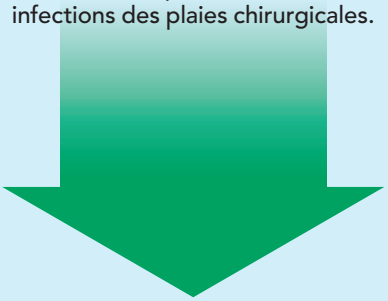

Étude de Birmingham

Le Queen Elizabeth University Hospital de Birmingham, un grand hôpital universitaire au Royaume-Uni, a mené une étude clinique sur les lingettes Clinell Universal Wipes, qui a permis de constater une réduction de 55 % des infections à SARM après leur mise en place au sein de l'établissement.

Compatibilité des matériaux

Les lingettes et le spray Clinell Universal ont fait l'objet de tests approfondis de compatibilité avec les matériaux afin de garantir une utilisation en toute sécurité dans les environnements cliniques. Des tests indépendants réalisés selon des normes internationalement reconnues (notamment ISO 22088 – Fissuration sous contrainte environnementale et ASTM G31 – tests de corrosion) démontrent que Clinell Universal est compatible avec les plastiques, caoutchoucs et métaux les plus couramment utilisés dans les dispositifs médicaux et les environnements hospitaliers.

Au cours de ces tests, aucune altération visible, aucune fissure due à la contrainte, aucune corrosion ni aucun affaiblissement des propriétés mécaniques n'ont été constatés dans des conditions d'utilisation normales. Les produits Clinell Universal sont donc adaptés au nettoyage et à la désinfection réguliers des équipements et surfaces médicaux sensibles.

Une liste détaillée des matériaux testés est disponible sur demande.


Applications

Grâce à leur formule efficace mais douce, les lingettes Clinell Universal Wipes conviennent aux dispositifs médicaux non invasifs (CE) et aux surfaces générales (biocide PT2) sans risque de détérioration lorsqu'elles sont utilisées correctement. Les applications ci-dessous sont données à titre d'exemple et ne constituent pas une liste exhaustive.


- Transducteurs à ultrasons
- Oxymètres
- Sondes Doppler
- Stéthoscopes
- Appareils d'ECG
- Incubateurs
- Équipement de radiologie
- Tensiomètre et brassard
- Écrans
- Poignée de porte
- Interrupteur
- Sommiers et matelas
- Pompe à perfusion et pied
- Thermomètre
- Fauteuil roulant, déambulateur
- Table de soins, brancard
- Téléphone et télécommande
- Fauteuil, table de chevet et table d'appoint
- Équipements sanitaires (robinets, siège de toilettes et bouton de chasse d'eau)

Comment nettoyer efficacement les surfaces ?


Le port de gants n'est pas obligatoire pour l'utilisation du produit (sauf en cas de contact avec du sang ou des fluides corporels et de risque de contamination).

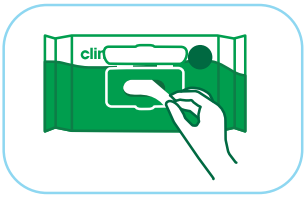


- Sortez une lingette de l'emballage.

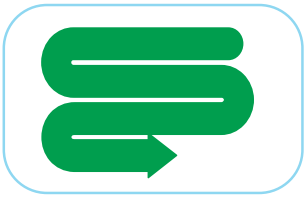

- Commencez par la surface propre, puis passez à la surface sale et essuyez en formant un S. N'essuyez pas deux fois la même zone.

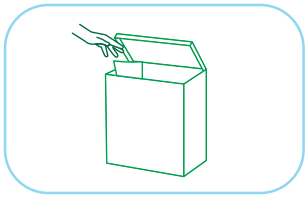

- Utilisez une lingette par surface. Remplacez la lingette dès qu'elle est sèche ou sale, puis jetez-la.

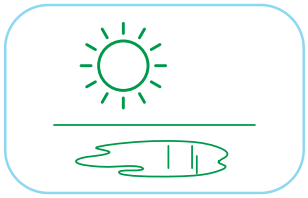

- Laissez la surface sécher à l'air libre.

Distributeur



Chaque support mural pour lingettes est fourni de série avec les 4 autocollants suivants :

- Les applications pratiques (sur le côté)
- Mode d'emploi (sur le côté)
- Pas de lingette pour bébé (face avant)
- Ne pas tirer la chasse (face avant)

clinell®

Mode d'emploi des lingettes

Sortez une lingette de l'emballage.


Commencez de la surface propre vers la surface sale, essuyez en formant un S.

Ne passez pas deux fois sur la même zone.


Utilisez une seule lingette par surface.

Remplacez la lingette lorsqu'elle est sèche ou sale et jetez-la.

Laissez la surface sécher à l'air libre.

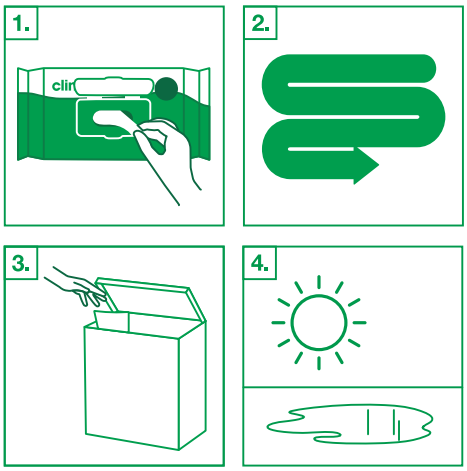


Les matériaux/surfaces suivants doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement à l'aide de ces lingettes:
(voici quelques exemples concrets, mais cette liste n'est pas exhaustive).

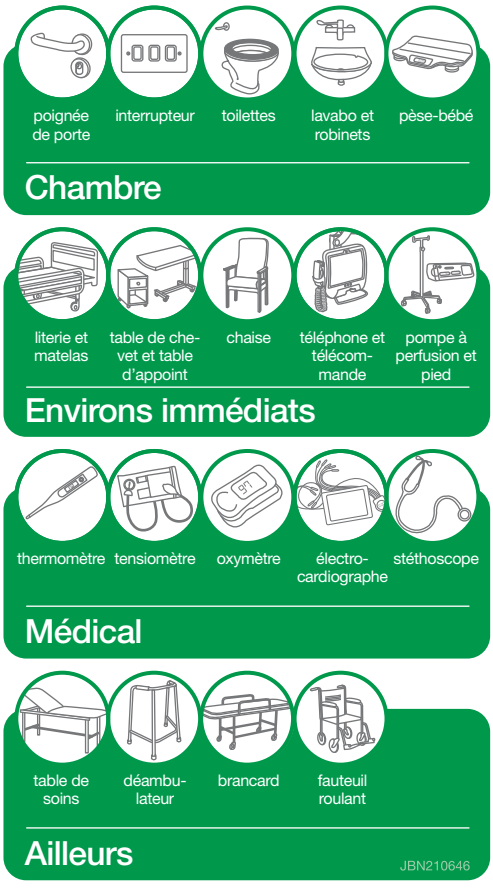





Comment remplir le distributeur ?

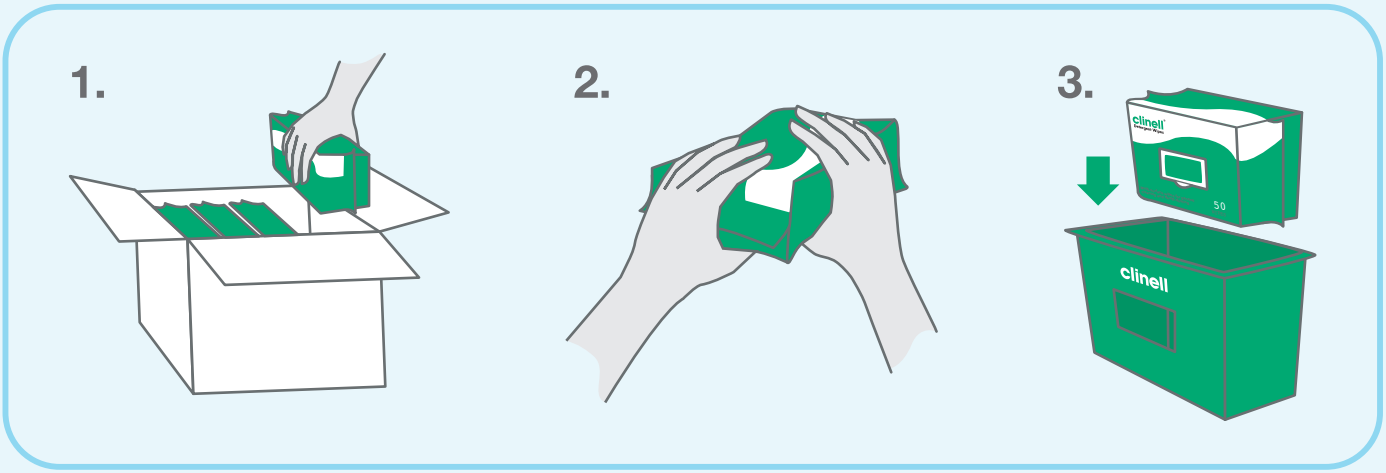

1. Sortez l'emballage de la boîte.
2. Appuyez sur tous les côtés de l'emballage pour répartir l'humidité de manière homogène.
3. Placez l'emballage sur le côté dans le support, le couvercle s'ouvrant vers l'extérieur.

Il est recommandé de placer le conditionnement CW200BE dans un support afin d'obtenir un fonctionnement optimal et stable (l'humidité sera ainsi répartie uniformément et les lingettes resteront toutes aussi humides les unes que les autres).

Emballage à clip (CWCP50)

Le clip intégré à notre célèbre emballage à couvercle rabattable a été renforcé et présente une forme angulaire, ce qui lui confère une solidité suffisante (voir ci-contre) et lui permet de s'adapter parfaitement aux potences à perfusion, aux tensiomètres, aux fauteuils de patient, aux cadres de lit, aux supports de moniteurs, aux chariots de soins, aux chariots et à de nombreux autres appareils.





Emballage autocollant (CWAB50)

Toujours à portée de main. Retirez le film plastique au dos et collez-le, par exemple, sur le côté d'un échographe ou sur un mur à proximité. L'adhésif puissant maintient le sachet en place, mais s'enlève facilement sans laisser de traces.

DESCRIPTION DU PRODUIT	EMBALLAGE	ARTICLE
Lingettes Clinell Universal (200)	Paquet de 200 lingettes (22 x 27,5 cm) Carton : 6 x 200 Palette : 360 x 200	CW200BE
Lingettes Clinell Universal en paquet à clip (50)	Paquet de 50 lingettes (20 x 20 cm) Carton : 24 x 50 Palette : 1 080 x 50	CWCP50
Lingettes Clinell Universal en paquet adhésif (50)	Paquet de 50 lingettes (20 x 20 cm) Carton : 24 x 50 Palette : 1 080 x 50	CWAB50
Distributeur pour CW200BE		CWD

Pourquoi choisir les lingettes Clinell Universal Wipes ?

1. Lingette pour surfaces générales (biocide PT2) et dispositifs médicaux non invasifs (CE).
2. Nettoie et désinfecte en une seule étape.
3. Large spectre d'action avec des temps de contact courts à partir de 10 secondes (selon le micro-organisme), ET normes respectées dans des conditions sales (<> conditions propres).
4. Sans alcool.
5. Testé dermatologiquement et doux pour la peau.
6. Il n'est pas nécessaire de porter des gants pour utiliser les lingettes Clinell Universal Wipes.
7. Sûr à l'usage : aucune classification de danger, ininflammable, non corrosif.
8. Compatible avec les matériaux délicats tels que le plastique, le plexiglas, le caoutchouc, le métal, l'inox.
9. Lingette résistante, qui ne peluche pas et ne se déchire pas, qui répartit uniformément le désinfectant sur la surface.
10. Un parfum agréable.
11. Moins de déchets grâce à des lingettes plus fines.
12. Moins de déchets grâce au grand format contenant 200 lingettes.
13. Économique grâce au grand format de 200 lingettes.
14. Emballage avec couvercle à rabat refermable.
15. Les lingettes sortent facilement une par une de l'emballage (ce qui évite le gaspillage).
16. Durée de conservation de 6 mois après ouverture (possibilité de l'indiquer sur l'emballage).
17. Le distributeur fourni permet de disposer facilement du produit partout (chambre de patient/point de soins, local de service, poste de garde, salle d'examen, salle de kinésithérapie, etc.).
18. Différentes options d'emballage pour des applications et des situations spécifiques (chariots de soins, bloc opératoire, urgences, soins intensifs, etc.).
19. Ce produit est également disponible en flacon pulvérisateur de 750 ml, ce qui évite les erreurs de manipulation et permet une utilisation combinée.
20. Une efficacité prouvée dans la pratique par des études cliniques, une référence mondiale et une solide position de leader sur le marché Belge.

Profitez également de ;

EvaluClean™

Un outil d'évaluation simple et rapide

clinell™ SURFACE

Le système le plus avancé pour l'évaluation de l'hygiène environnementale.

Les marqueurs fluorescents constituent une méthode plus efficace que l'ATP pour évaluer le degré de propreté d'une surface et reflètent mieux la charge microbiologique que l'ATP[1].

L'utilisation d'un système de marquage fluorescent dans les services de soins intensifs a permis d'améliorer de 40 % le nettoyage des surfaces[2].



1. Rutala, Gergen, Sickbert-Bennett, Huslage, Weber. Comparison of Four Methods to Assess Cleanliness. APIC Presentation, June 2013. http://disinfectionandsterilization.org/files/2012/12/NewTechAPIC13.ppt
2. Carling PC, Parry MF, Bruno-Murtha LA, Dick B. Improving environmental hygiene in 27 intensive care units to decrease multidrug-resistant bacterial transmission. Crit Care Med. 2010 Apr;38(4):1054-9.

CLINELL UNIVERSAL SPRAY




Clinell Universal Spray est un produit nettoyant et désinfectant sans alcool sous forme de mousse destiné aux dispositifs médicaux non invasifs (CE) et aux surfaces générales (biocide PT2).

Il élimine la saleté en un seul geste et neutralise un large éventail de micro-organismes. Grâce à son temps de contact réduit, au moins 99,99 % des germes sont efficacement éliminés.

La puissante combinaison de plusieurs principes actifs (biocides) et du Polyquat garantit un effet synergique et une efficacité antimicrobienne optimale. Le spray s'applique facilement sur de grandes surfaces, présente une excellente compatibilité avec les matériaux et est facile à utiliser dans n'importe quel environnement.

Mode d'emploi

Il n'est pas nécessaire de porter des gants pour utiliser ce produit (sauf en cas de présence de sang ou de liquides corporels et de risque de contamination).

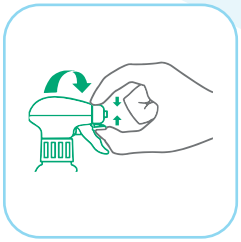

1. Appuyer et tourner pour ouvrir l'embout.




2. Tirez sur la poignée et vaporisez sur la lingette ou uniformément sur la surface.



3. Commencez par la surface propre et terminez par la surface sale, en effectuant des mouvements en forme de S. Ne passez pas deux fois sur la même zone.



4. Fermez l'embout. Jetez la lingette.

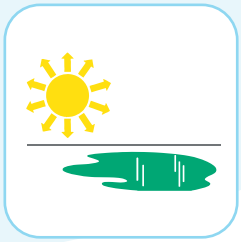

5. Laissez la surface sécher à l'air libre.

DESCRIPTION DU PRODUIT	EMBALLAGE	ARTICLE
Clinell Universal Spray (Vaporisateur de 750ml)	Bouteille de 750 ml Carton : 12 x 750 ml Palette : 576 x 750 ml	CDS750BE

Pourquoi choisir Clinell Universal Spray ?

1. Spray pour surfaces générales (biocide PT2) et dispositifs médicaux non invasifs (CE).
2. Nettoie et désinfecte en une seule étape.
3. Large spectre d'action avec des temps de contact courts à partir de 10 secondes (selon le micro-organisme), ET normes respectées dans des conditions sales (<> conditions propres).
4. Sans alcool.
5. Testé dermatologiquement et doux pour la peau.
6. Il n'est pas nécessaire de porter des gants pour utiliser Clinell Universal Spray.
7. Sûr à l'usage : aucune classification de danger, ininflammable, non corrosif.
8. Compatible avec les matériaux délicats tels que le plastique, le plexiglas, le caoutchouc, le métal, l'inox.
9. Sous forme de mousse sans pulvérisation, ce qui exclut tout risque de libération d'aérosols.
10. Système de dosage intégré dans lequel la pompe/tête moussante ne peut pas être retirée du flacon (verrouillage de sécurité).
11. Un parfum agréable et neutre.
12. À consommer dans les 6 mois suivant l'ouverture.
13. Ce produit est également disponible en paquets de 200 lingettes, ce qui signifie qu'il n'y a pas de risque d'erreur de manipulation et qu'une utilisation combinée est possible.
14. Une efficacité prouvée dans la pratique par des études cliniques, une référence mondiale et une solide position de leader sur le marché Belge.

Fondements scientifiques et références :

Les surfaces et les dispositifs médicaux sont contaminés et peuvent être désinfectés efficacement à l'aide de lingettes imprégnées.

- Lorsque le personnel soignant désinfecte les surfaces fréquemment touchées à l'aide de lingettes jetables, cela réduit la contamination microbienne et cet effet dure jusqu'à 6,5 heures de plus qu'un nettoyage classique effectué par une équipe d'entretien.

  B. Casini et al., "Improving cleaning and disinfection of high-touch surfaces in intensive care during carbapenem-resistant acinetobacter baumannii endemo-epidemic situations," International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 15, no. 10, 2018, doi: 10.3390/ijerph15102305.

- La décontamination des brassards de tensiomètre réduit la contamination microbienne, rendant ainsi superflus les brassards jetables, coûteux et non respectueux de l'environnement.

  P. A. Zimmerman, M. Browne, and D. Rowland, "Instilling a culture of cleaning: Effectiveness of decontamination practices on non-disposable sphygmomanometer cuffs," Journal of Infection Prevention, vol. 19, no. 6, pp. 294–299, Nov. 2018, doi: 10.1177/1757177418780997.

Une désinfection efficace des dispositifs médicaux permet de réduire les coûts.

- Dans le cadre de l'étude CLEEN, les procédures de nettoyage et de désinfection du matériel médical partagé ont été adaptées, avec des heures de nettoyage supplémentaires, des formations, des audits et un retour d'information du personnel. Les coûts ont diminué de 642.010 dollars australiens pour 1 000 patients, par rapport à un groupe témoin où les procédures classiques ont été appliquées.

  D. Brain et al., "Economic Evaluation of Enhanced Cleaning and Disinfection of Shared Medical Equipment," JAMA Network Open, vol. 8, no. 4, Apr. 2025, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2025.8565.

Les lingettes imprégnées améliorent l'observance des procédures de nettoyage et de désinfection :

- L'utilisation quotidienne de lingettes imprégnées à la place de la désinfection traditionnelle au chlore a permis de réduire de manière significative la contamination des surfaces.

  H. Siani, R. Wesgate, and J. Y. Maillard, "Impact of antimicrobial wipes compared with hypochlorite solution on environmental surface contamination in a health care setting: A double-crossover study," American Journal of Infection Control, vol. 46, no. 10, pp. 1180–1187, Oct. 2018, doi: 10.1016/j.ajic.2018.03.020.

- L'utilisation de lingettes nettoyantes a permis d'améliorer le respect et l'acceptation des protocoles de nettoyage.

  E. T. Martin et al., "150. Cleaning High Touch Surfaces of Patients' Rooms: Make It Easier, and It Simply Gets Cleaner A Safer, More Effective Method for Cleaning and Disinfecting GI Endoscopic Procedure Rooms." [Online]. Available: https://academic.oup.com/ofid/article/5/suppl_1/S346/5207799.

Une désinfection efficace des surfaces et des dispositifs médicaux à l'aide de lingettes imprégnées permet de réduire le nombre d'infections.

- La mise en place d'une lingette désinfectante Universal dans tous les services d'un grand hôpital universitaire au Royaume-Uni a entraîné une baisse significative de l'incidence des infections au SARM pour 100 000 jours-patients (passant de 20,7 à 9,4 pour 100 000 jours-patients ; $p < 0,005$).

  M. I. Garvey, M. A. C. Wilkinson, C. W. Bradley, K. L. Holden, and E. Holden, "Wiping out MRSA: Effect of introducing a universal disinfection wipe in a large UK teaching hospital," Antimicrobial Resistance and Infection Control, vol. 7, no. 1, Dec. 2018, doi: 10.1186/s13756-018-0445-7.

- L'étude randomisée et contrôlée CLEEN, menée en grappes, a démontré qu'une approche multimodale du nettoyage, comprenant 3 heures supplémentaires par jour pour le matériel médical partagé, associée à une formation continue, à des contrôles et à un retour d'information, a permis de réduire le nombre d'infections associées aux soins de 34,5 %.

  K. Browne et al., "Investigating the effect of enhanced cleaning and disinfection of shared medical equipment on health-care-associated infections (CLEEN): a stepped-wedge, cluster randomised, controlled trial," 2024, doi: 10.1016/S1473-3099(24)00399.

Références :

1. Garvey MI, Wilkinson MAC, Bradley CW, Holden KL, Holden E. Wiping out MRSA: effect of introducing a universal disinfection wipe in a large UK teaching hospital. Antimicrob Resist Infect Control. 2018;7:155.
2. Otter JA, Burgess P, Davies F, Mookerjee S, Singleton J, Gilchrist M, Parsons D, Brannigan ET, Robotham J, Holmes AH. Counting the cost of an outbreak of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae: an economic evaluation from a hospital perspective. Clin Microbiol Infect. 2017 Mar;23(3):188-196.
3. Guest JF, Keating T, Gould D, et al. Modelling the annual NHS costs and outcomes attributable to healthcare-associated infections in England. BMJ Open 2020;10:e033367.
4. World Health Organization. Antimicrobial Resistance. World Health Organization. Published November 21, 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance.
5. Infection Prevention and Control of Epidemic- and Pandemic-Prone Acute Respiratory Infections in Health Care. Geneva: World Health Organization; 2014.
6. Jenkins EK, Silman F, Gosden PE. Sharps Tray Cleaning after use - A completed audit cycle. J Clin Audit. 2012; 4(3).
7. Zimmerman P-A, Browne M, Rowland D. Instilling a culture of cleaning: Effectiveness of decontamination practices on non-disposable sphygmoman-ometer cuffs. J Infect Prev. 2018;19(6):294-299.
8. Shepherd E, Leitch A, Curran E. Infection Prevention and Control Team NHS Lanarkshire. A quality improvement project to standardise decontamination procedures in a single NHS board in Scotland. J Infect Prev. 2020;21(6):241-246.
9. Casini B, Righi A, De Feo N, et al. Improving Cleaning and Disinfection of High-Touch Surfaces in Intensive Care during Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Endemo-Epidemic Situations. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(10):2305.
10. Martin ET, Dadon M, Lazarovitch T, Saadon H, Maya T, Jaffe K, Moscovich S, Zaidenstein R, Marchaim D. 1150. Cleaning High Touch Surfaces of Patients' Rooms: Make It Easier, and It Simply Gets Cleaner. Open Forum Infect Dis. 2018 Nov 26;5(Suppl 1):S346.
11. Bloss R, Meyer S, Kampf G. Adsorption of active ingredients of surface disinfectants depends on the type of fabric used for surface treatment. J Hosp Infect. 2010 May;75(1):56-61.
12. Chang F, Lin C, Lee C. A comparison of 1000ppm Chlorine and single-use detergent/disinfectant wipes for decontamination of a clinical environment contaminated with Vancomycin-resistant Enterococci. Journal of Infection Prevention. 2017;18(1S):S14.
13. Browne K, White NM, Russo PL, et al. Investigating the effect of enhanced cleaning and disinfection of shared medical equipment on health-care-associated infections in Australia (CLEEN): a stepped-wedge, randomised cluster, controlled trial.'. Lancet Infect Dis. Published online August 13, 2024. doi.org/10.1016/S1473-3099(24)00399-2.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT CERTAINS DE NOS AUTRES PRODUITS CLINELL

Clinell Hexi Hub désinfecte les embouts de cathéters et les points d'accès conformément aux directives internationales en matière de prévention des infections, à l'aide de chlorhexidine à 2 % dans de l'alcool à 70 %, contribuant ainsi à prévenir efficacement les infections liées aux cathéters.







Les lingettes Clinell à l'acide peracétique assurent une désinfection de haut niveau et sont efficaces contre le biofilm, les spores et les micro-organismes résistants.



Le désinfectant Clinell Drain élimine les biofilms bactériens présents dans les canalisations et les siphons, là où les désinfectants classiques se révèlent souvent inefficaces ou ne sont pas homologués en tant que biocides pour cette application.





Les lingettes Clinell Hand Wipes sont des lingettes sans alcool qui nettoient et désinfectent les mains, et sont également homologuées comme biocide PT2 pour une utilisation sur les surfaces. Disponibles en emballage individuel ou en boîte de 30 lingettes destinée aux patients. Idéales pour l'hygiène des patients au chevet et dans les situations où l'alcool n'est pas recommandé.

Les lingettes désinfectantes Clinell Alcohol Wipes contiennent 70 % d'alcool isopropylique, ce qui permet une évaporation rapide et réduit les résidus sur, entre autres, les écrans, les claviers, les téléphones DECT, les tablettes, les smartphones et les moniteurs. Conviennent également aux équipements médicaux pour lesquels le fabricant prescrit spécifiquement une désinfection avec une solution alcoolique à 70 %.





Clinell Rediair est un purificateur d'air compact, silencieux et mobile, équipé d'un filtre HEPA H14, qui améliore activement la qualité de l'air dans les environnements de soins. Il permet ainsi de créer un environnement plus sûr pour les patients et le personnel soignant. Une barrière supplémentaire efficace dans la lutte contre les agents pathogènes en suspension dans l'air.

DESCRIPTION DU PRODUIT	EMBALLAGE	ARTICLE
Universal Wipes Tub	Emballage de 100 lingettes (20 x 25 cm)	CWTUB100
Universal Wipes Recharge Tub	Recharge de 100 lingettes (20 x 25 cm)	CWTUB100R
Universal Wipes Seau	Seau de 225 lingettes (26 x 26 cm)	CWBUC225
Universal Wipes Recharge Seau	Recharge de 225 lingettes (26 x 26 cm)	CWBUC225R
Clean ruban adhésif indicateur (100m)	12 x 100 mètres	CCIT100
Clean Notes repositionnables verte (4 x 250)	12 x 1000	CCIN1000GS
Clinell Hexi Hub	Paquet de 240 lingettes individuelles	CA2C240
Clinell Peracetic Acid Wipes	Paquet de 25 lingettes	CS25
Clinell Drain Disinfectant	24 sachets par boîte	CSDD24
Clinell Hand Wipes (30)	Paquet de 30 lingettes	CAHW30
Clinell Hand Wipes (100)	Boîte de 100 sachets individuels contenant 1 lingette	CAHW100
Clinell Alcohol Wipes	Paquet de 150 lingettes	CAW150L
Clinell Rediair	à l'unité	RAIREU

gama healthcare

dialex BIOMEDICA

Dialex Biomedica SA
Caetsbeekstraat 1
3740 Bilzen-Hoeselt, Belgique
T: +32 (0) 89 41 71 40
E: info@dialexbiomedica.be
W: dialexbiomedica.be

2026-0662/05